


## Cómo hacer un clon de tu voz en ElevenLabs y conectarlo a Grid 3 GRATIS.

Desde el 20 de octubre de 2025, ElevenLabs ha actualizado su Programa de Impacto sobre cómo solicitar una licencia para usuarios de Grid.


Partimos de la cuadrícula de Grid y tocamos las tres rayas del menú.

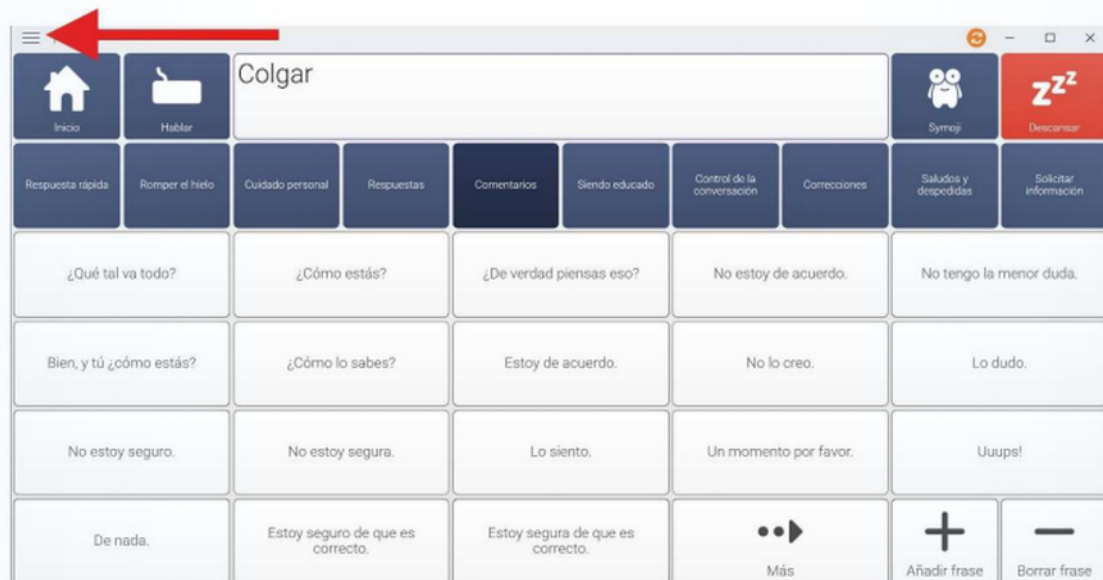


En el menú, pulsamos Configuración.



Abrimos y seleccionamos voz y, dentro de ella sobre voz que lee

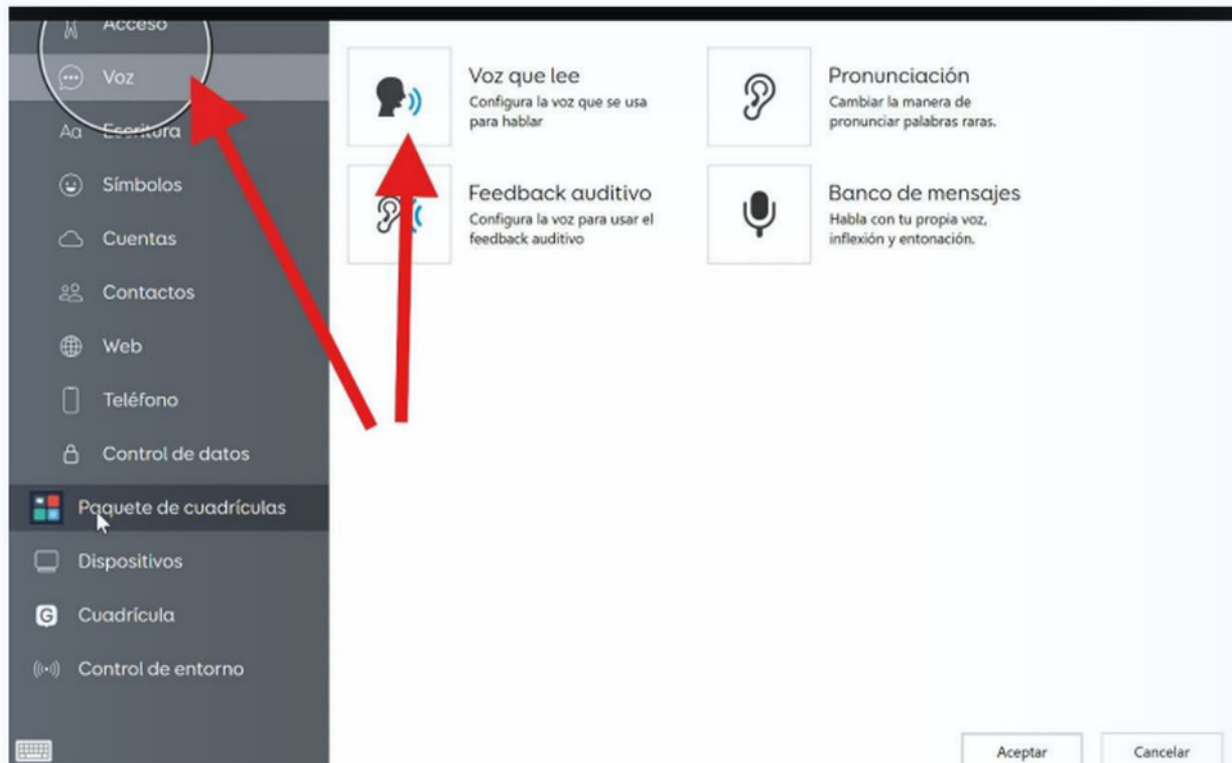

Al abrirse, veremos que en la parte baja se hace referencia a ElevenLabs. Pulsamos sobre configurar.

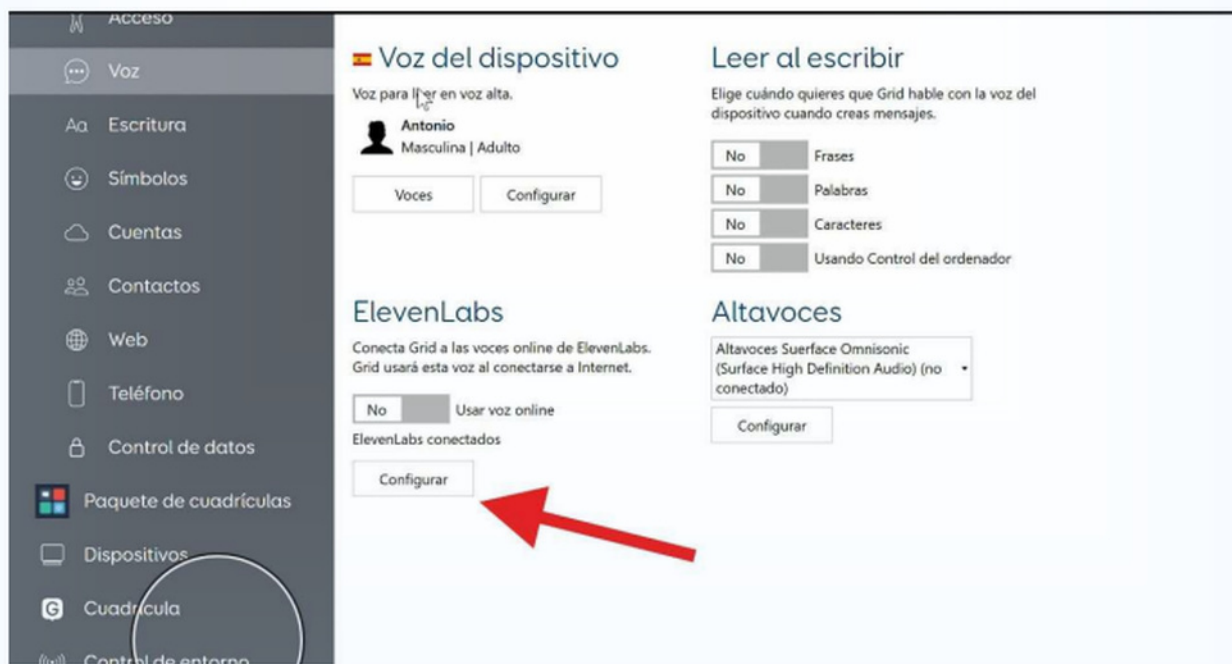

Se abre una pantalla que, de momento, está vacía. Pulsamos sobre el enlace a Smartbox Hub y se abrirá un tutorial de ElevenLabs que habrá que seguir para registrar la cuenta y solicitar el alta en el programa Impact.

Javier Gamez Mart...

Acceso

Voz

Escritura

Símbolos

Cuentas

Contactos

Web

Teléfono

Control de datos

Paquete de cuadrículas

Dispositivos

Cuadrícula

Control de entorno

## ← ElevenLabs

Para conectar Grid con ElevenLabs, primero tienes que proporcionar la clave de la API. Visita [Smartbox Hub](#) para obtener más información.

Clave de la API

Conectar

### Voz

Reproducir Avanzados

Créditos: 82.805 / 505.705

Para obtener más información sobre cómo procesa ElevenLabs los datos, consulta la [ElevenLabs Privacy Policy](#)

español (España)

Aceptar Cancelar

Información del producto > Software > Grid > Grid para iPad > Cómo usar > Voces >  
ElevenLabs - guía paso a paso para usuarios de Grid que solicitan una licencia

## ElevenLabs - guía paso a paso para usuarios de Grid que solicitan una licencia

Podemos ofrecer una licencia gratuita de ElevenLabs a los usuarios de Grid. Desde el 20 de octubre de 2025, ElevenLabs ha actualizado su Programa de Impacto para solicitar una licencia. Registra tu interés desde tu cuenta de ElevenLabs.

<https://elevenlabs.io/app/sign-up>

Si ya tienes una cuenta de ElevenLabs, no necesitas crear una cuenta nueva. Ve directamente al paso 6.

### Solicita tu licencia gratuita


1. Ve al sitio web de ElevenLabs y crea una cuenta:

<https://elevenlabs.io/app/sign-up>

**Let's chat**

We're Online



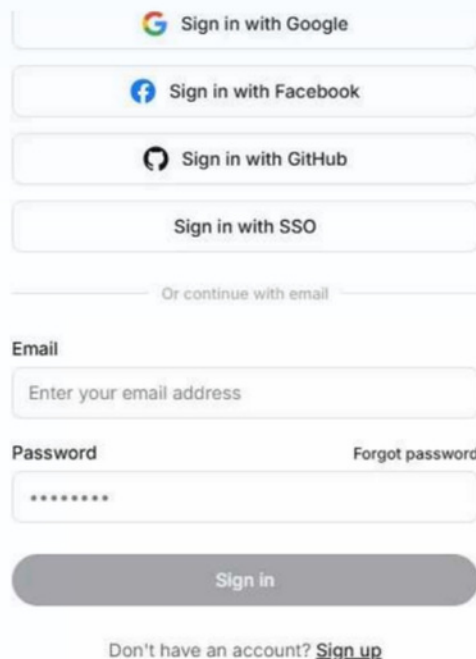

Sign in with Google

Sign in with Facebook

Sign in with GitHub

Sign in with SSO

Or continue with email

Email

Enter your email address


Password [Forgot password](#)

\*\*\*\*\*

Sign in

Don't have an account? [Sign up](#)

2. ElevenLabs enviará un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Selecciona el enlace «Verificar correo electrónico» para confirmar la cuenta.

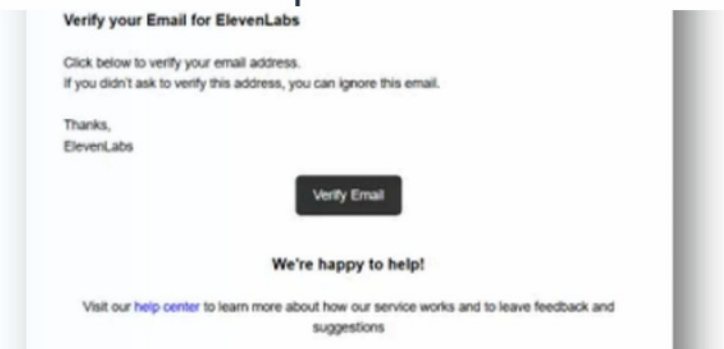

3. Cuando hayas confirmado tu correo electrónico, inicia sesión en el sitio web de ElevenLabs y completa las preguntas de registro.

What's your date of birth?

DD

Month



YYYY

What's your preferred language?



English



☐ I want to receive updates, special offers, and promotional emails.  
I understand that I can opt out at any time.

Back

Next

4. Durante las preguntas de registro, se te preguntará qué plataforma de ElevenLabs quieres usar. Selecciona Creative Platform.

Switch between platforms at any time



**Creative Platform**  
Create AI audio

Features

- Text to Speech
- Sound Effects
- Studio
- Speech to Text
- Voice Changer
- Voice Isolator
- Dubbing
- Music **New**




**Agents Platform**  
Build and manage your AI agents


Features

- Agents
- Tools
- Integrations
- Outbound
- Knowledge Base
- Conversations
- Phone numbers

5. Al final del proceso de registro se te pedirá que elijas el plan que quieres usar. Selecciona la opción Skip, ya que solo necesitas una cuenta gratuita para solicitar una licencia.

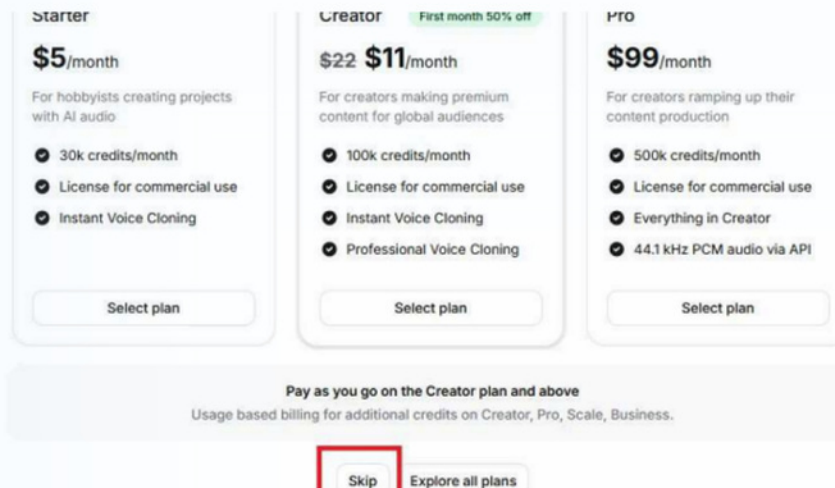

6. Ahora accederás a tu cuenta de ElevenLabs. Selecciona tu cuenta, el icono de My Workspace en la parte superior derecha, y después Apply for Impact Program.

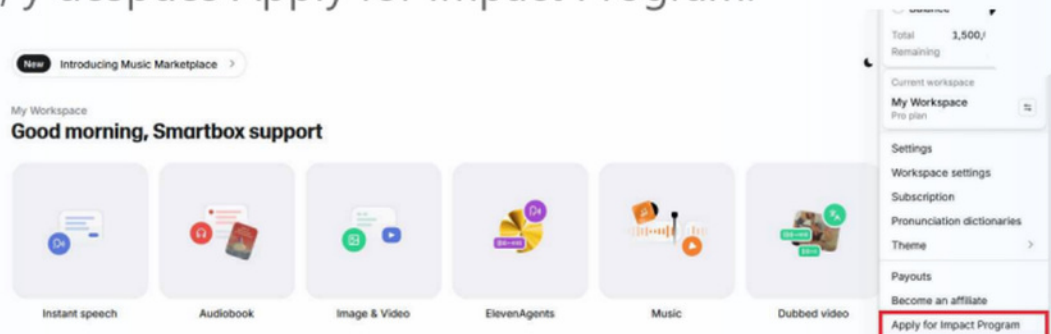

7. Rellena los datos de Personal Information y después selecciona Partner. Elige Smartbox Assistive Technology en la lista y pulsa Continue.

The image shows two screenshots from the ElevenLabs interface. The top screenshot is a registration form with the following fields: 'Last Name \*', 'Phone Number', 'Year of Birth \*', 'Gender' (a dropdown menu with 'Select gender' as the placeholder), 'Location \*' (with a placeholder 'City, State, Country'), and 'Partner \*' (a dropdown menu with 'Select a partner' as the placeholder). There are 'Cancel' and 'Continue' buttons at the bottom right. The bottom screenshot is a modal titled 'Impact Program' with a close button (X) in the top right corner. It contains a list of partner organizations: 'Clinicians (SLPs, OTs, AAC Specialists, Nonprofit employees)', 'Cure PSP', 'Jabbla', 'Jay S. Fishman ALS Augmentative Communication Program', 'Lary's Speakeasy', 'MND Association', 'MSA Trust', 'Mission MSA', 'Scott-Morgan Foundation', and 'Smartbox Assistive Technology'. The 'Smartbox Assistive Technology' option is highlighted with a red rectangular border.

8. Para verificar tu solicitud de licencia, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla de ElevenLabs para enviar el correo electrónico y confirmar tu elegibilidad. Elige tu servicio de correo preferido, añade la verificación requerida y envía el correo. Cuando selecciones el proveedor de correo, se generará un mensaje modelo que puedes completar con tus datos de verificación de elegibilidad.

To apply for an ElevenLabs code from Smartbox, we need to confirm that you are a Grid user. Please confirm ONE of your device details, so that we can check your eligibility. (1) Smartbox device serial number (2) Grid licence code (3) Smartbox Account email address

**Instructions:**

1. Choose your preferred email service below to open a pre-filled message
2. Ensure you provide the required verification in the email and/or documentation attached to the email
3. Send the email to your partner
4. **⚠ Come back to this page and click "Done" to complete your application (REQUIRED!)**

Sending to: **Smartbox Assistive Technology**

elevenlabsrequests@thinksmartbox.com

Choose your email service:



La verificación que necesitaremos es el número de serie de tu dispositivo Smartbox, el código de licencia de Grid o la dirección de correo electrónico de tu cuenta Smartbox. Más detalles sobre cómo encontrar estos datos están aquí.

9. Después de enviar el correo, vuelve a la página de solicitudes de ElevenLabs y pulsa Hecho. Si no seleccionas Hecho, no podremos completar tu solicitud de licencia.

After sending your email, you **MUST** come back to this page and click the "Done - I've Sent the Email" button below to complete your application. Your application will not be submitted until you do this step!

**Important:** Please make sure you include all required verification details to the email before sending

Cancel

☒ **DONE - I've Sent the Email**



Búsqueda



Información del producto > Software > Cuadrícula > Cuadrícula 3 > Cómo usarlo  
> ¿Cómo puedo encontrar más información sobre mi instalación de Grid 3?

# ¿Cómo puedo encontrar más información sobre mi instalación de Grid 3?

La opción «Acerca de» de Ayuda mostrará información sobre tu instalación de Grid 3. Esta información puede ser requerida por nuestro equipo de soporte si tienes algún problema. Puedes encontrar la opción «Acerca de» navegando por la barra de menú (tres líneas en la esquina superior izquierda) – Ayuda – Acerca de.

**Let's chat**

We're Online

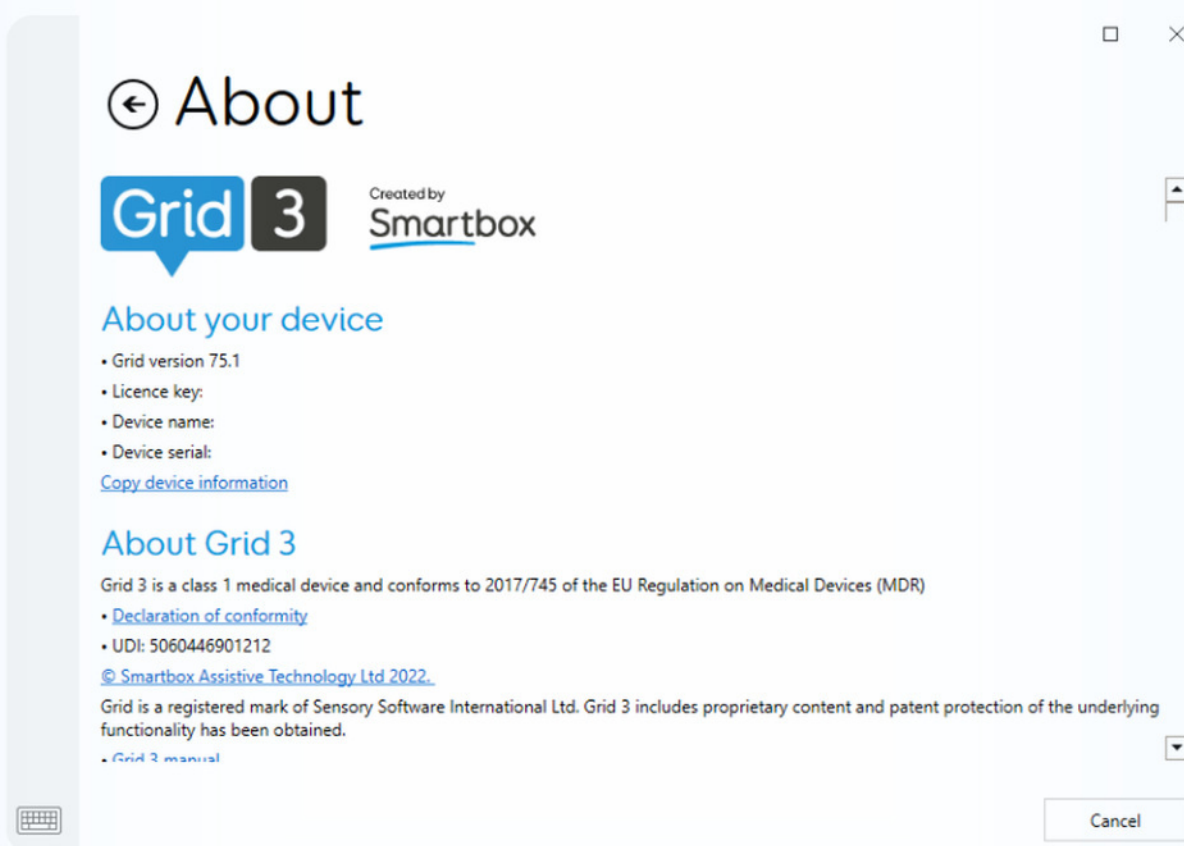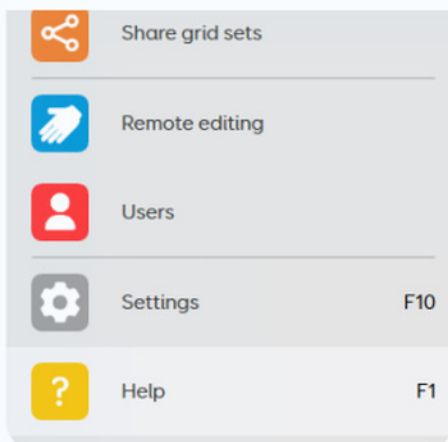

La página «Acerca de» te mostrará la versión actual de Grid 3, tu clave de licencia, el nombre del dispositivo y el número de serie. La sección inferior contiene la Declaración de conformidad de Grid 3, así como enlaces al manual, la política de privacidad y otros documentos útiles.

Cuando nos hayan confirmado el alta después de enviar el correo con los números de serie, recibiremos en los próximos días un correo como este.

**II**ElevenLabs

## ¡Bienvenidos al Programa de Impacto de ElevenLabs!

Hola Javier,

Gracias por solicitar una voz de **ElevenLabs** para usar en Grid. Nos complace confirmar que su solicitud ha sido aprobada. Su cuenta de **ElevenLabs** se actualizará automáticamente la próxima vez que inicie sesión. Si es nuevo en **ElevenLabs**, aquí tiene una útil guía paso a paso sobre cómo crear una voz: <https://elevenlabs.io/docs/product-guides/voices/voice-cloning/professional-voice-cloning> También puede encontrar más información sobre el uso de **ElevenLabs** en Grid en Smartbox Hub: [hub.thinksmartbox.com/knowledgebase/articles-about-elevenlabs/](https://hub.thinksmartbox.com/knowledgebase/articles-about-elevenlabs/) Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Atentamente, El equipo de Smartbox

Comience

El botón «Comience» nos llevará a la página de ElevenLabs, donde iniciaremos sesión con la cuenta con la que nos dimos de alta.

**II**ElevenLabs

Iniciar sesión

## Trayendo De la tecnología a la vida

Impulsando a las mejores empresas, creadores y desarrolladores. Desde ElevenAgents para la experiencia del cliente, ElevenCreative para la creación de contenido, hasta el principal generador de voces con IA.


Regístrate

Ventas de contacto




Chat de voz

Una vez identificados, pulsaremos sobre el menú.

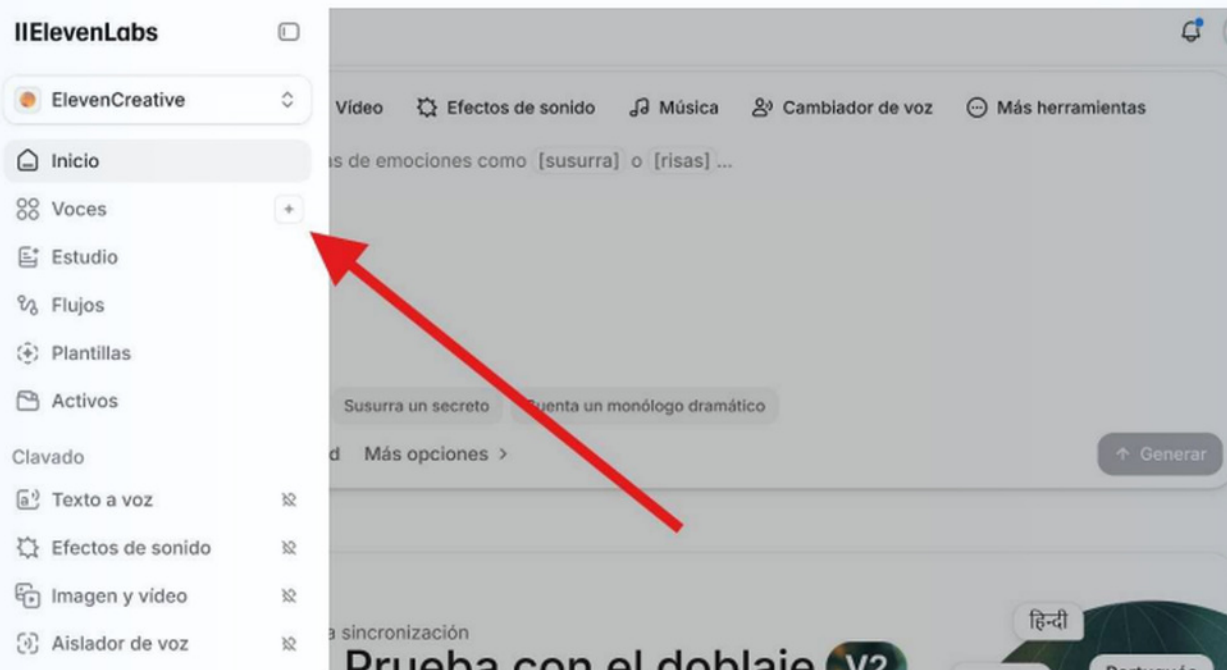


Se abrirá este desplegable y pulsaremos el signo + para crear nuestra voz. VOZ

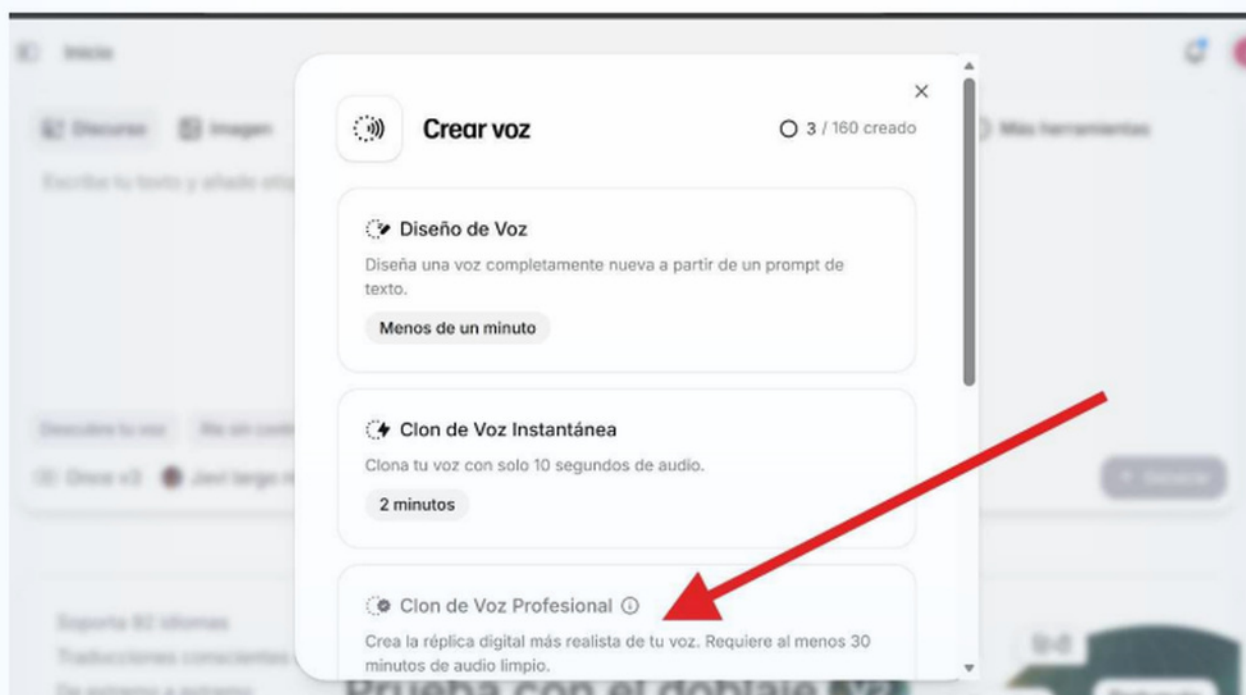




Se abrirá un cuadro central donde podremos crear una voz a partir de una descripción en texto; un clon instantáneo, para el que bastan diez segundos de grabación; y, por último, un clon profesional, para el que lo óptimo son dos o tres horas de grabación. De todos modos, yo solo disponía de 17 minutos; eso sí, en muy buenas condiciones, y el resultado ha sido sorprendentemente bueno.

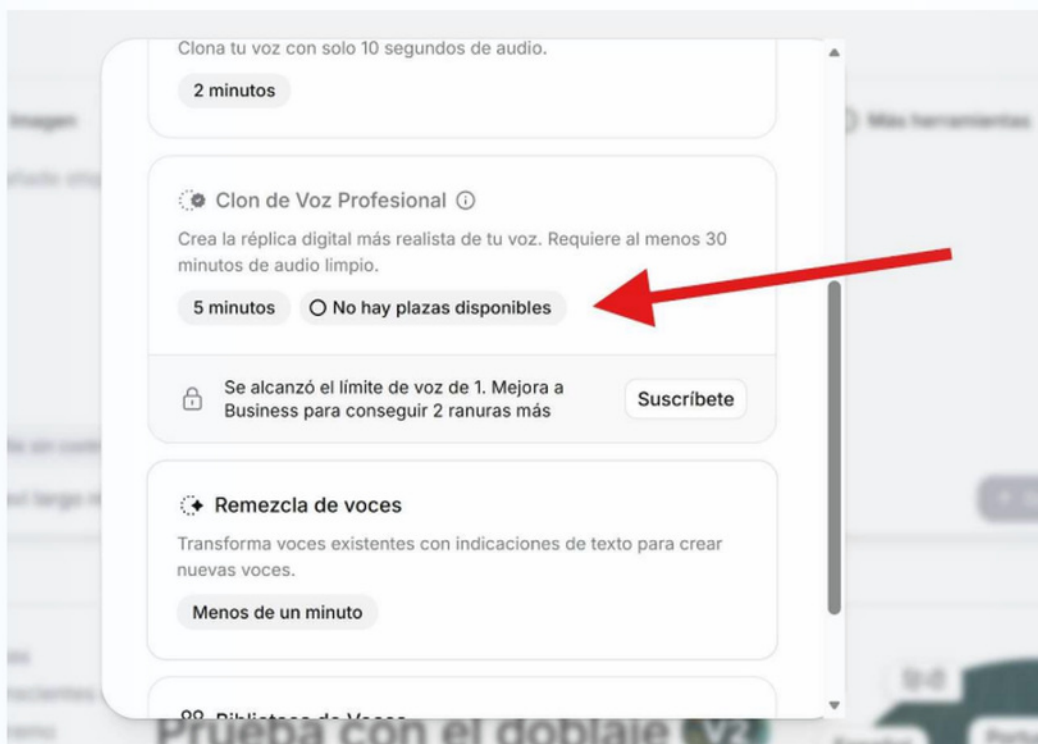

Como se puede apreciar en la imagen anterior, a mí me indica que no hay plazas disponibles. Eso es debido a que esta licencia gratuita solo nos permite hacer un clon profesional, por lo que aconsejo practicar antes con el instantáneo.

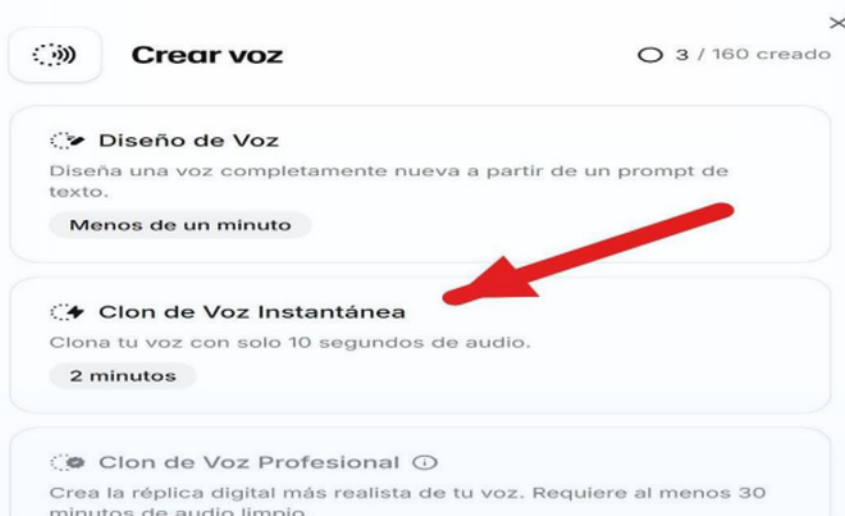



Su interfaz es muy similar a la del clon profesional.



#### Evita entornos ruidosos

Los sonidos de fondo interfieren con la calidad de la grabación.



#### Comprobar la calidad del micrófono

Prueba con unidades externas o micrófonos para auriculares para una mejor captura de audio.



#### Utiliza equipamiento consistente

No cambies el equipo de grabación entre muestras.



Haz clic para subir, o arrastra y suelta  
Archivos de audio o video de hasta 10MB cada uno

o



Grabar audio



Se requieren 10 segundos de audio

Siguiente

## Profesional

**Professional Voice Clone**  
Upload samples on the right and fill out details below.

**Voice name**  
This is how your voice will appear in the Voice Library.

**Language used in audio samples**  
This will allow us to process the audio correctly.

**Description**  
How would you describe this voice? This description will show up in the Voice Library if you share your voice.

| Label  | Value                |
|--------|----------------------|
| Accent | <input type="text"/> |

Add label

Upload samples
 Record yourself

**Tips to help you get started**  
Click to read through the best way to get an ultra realistic result.

**Separate multiple speakers**  
Upload your samples and we'll separate your voice for you!

Back

Auto-saved ✓

Next

De todos modos, a la mayoría les sucederá como a mí y aún no podrán clonar su voz profesional por las medidas de seguridad de la página. Solo se permite el clon si el propietario lo autoriza mediante una grabación previa con su propia voz. Por razones obvias muchos no la conservamos o se parece a la original como un huevo a una castaña.

Para salvar ese obstáculo, hay que enviar un correo electrónico a ElevenLabs, [team@elevenlabs.io](mailto:team@elevenlabs.io), acompañado de un informe médico que acredite los motivos; copia del DNI, permiso de conducir, etc. Y un documento proforma. Adjunto el modelo de correo y el documento proforma.

para team ▾

...

Good morning,

As far as the manual verification is applicable to me, I'm sending you the PVC Verification Document with a copy of my ID card and the evidence of my disease.

Best regards

A continuación se incluye el documento proforma.

# Confirmation of identity for voice cloning

## Background

You (the Client) wish to generate a clone of your voice using ElevenLabs' technology.

We (ElevenLabs) are committed to online safety and the ethical use of our voice cloning technology. For this reason, we check that you generate digital reproductions, or clones, of your own voice with your consent. We do so by verifying your identity and comparing various voice samples you provide following our instructions.

This process is not always suitable if you wish to generate a clone of your former voice which is different from your current voice due to personal circumstances like a medical condition, disability or gender reassignment.

When this is the case, we ask that you provide evidence of such personal circumstances which may include information related to your health. Specifically, we ask that you provide information like your name, a copy of your identity document, a description of your personal circumstances and evidence confirming your personal circumstance.

We understand this information may be sensitive, therefore we want to highlight that:

- We will maintain this information safe and confidential according to applicable laws.
- We only collect information which is necessary for us to verify your identity and only for this purpose.
- We will only use the information you share in this form with your consent.
- You have the right to withdraw consent from us collecting and processing this information. Contact our support team if you wish to do so.
- You also have the right to request us to erase this information by contacting us with your request.
- The information you shared with us will be erased if you delete your account.
- You can read our [privacy policy](#) on our website, [here](#).

If you have any question or request you can contact us as [privacy@elevenlabs.io](mailto:privacy@elevenlabs.io).

## Consent

You (the Client) confirm the following statements:

I confirm that I am the Speaker in the recordings shared with ElevenLabs.

The Speaker is understood as the person whose voice, likeness or speech is featured or fixed in the recordings shared with ElevenLabs.

I understand the digital reproductions or cloning of my voice may engage my rights, such as: intellectual property rights like copyright or performers' rights; personality, publicity or image rights; unfair competition rights and equivalent legal protection; personal data protection; or, other expectations of privacy protected by law.

I give permission to ElevenLabs to use recordings of my voice, vocal likeness, and speech to create digital reproductions (including digital clones) of my voice.

I consent to ElevenLabs collecting and processing the documents and information I submit with this form for the purpose of verifying my identity.

I understand that the documents and information I submit may include information about my health and I consent to ElevenLabs collecting and processing this information to verify my identity.

I have read ElevenLabs' [privacy policy](#).

### Description of personal circumstances

Please describe the personal circumstances which explain why recordings of your current voice are significantly different from the samples submitted to generate the clone of your former voice:

### Evidence

I enclose the following evidence to support my statements:

- ☐ Document confirming my identity  
(example: a copy of your passport, identity card, driving license)

AND

- ☐ Document confirming the personal circumstances described above  
(example: a copy or report from a medical professional)

Note: You need to submit both types of documents listed above.

### Client signature

(Client first name & surname)

\_\_\_\_\_  
(Client Signature)

(Date)



Seguramente en ese mismo día o en los dos siguientes veremos en la aplicación que ya podemos crear nuestro clon profesional de voz.

Subiremos la grabación, seleccionaremos idioma, acento, etc., y lo ejecutaremos.


En un par de días recibiremos un correo como este:

## II ElevenLabs

Your Professional Voice Clone **Javi long record** is ready to be used with our **Eleven** Flash v2.5 model! Start using it by clicking the button below or by heading to 'My Voices' in your **ElevenLabs** account.


Use voice →

El botón nos conducirá a esta pantalla, donde podremos probarla y modularla.

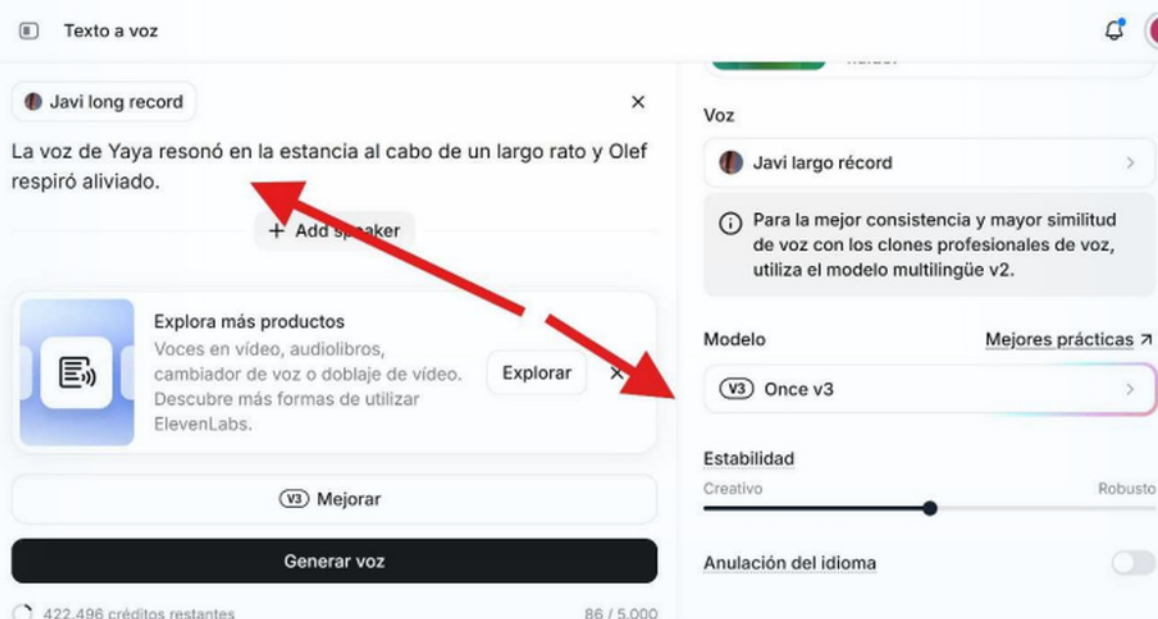

Cuando ya tenemos la voz solo nos falta conectarla al Grid 3. Para ello vamos a necesitar una clave API. Para conseguirla, volvemos al menú de la esquina superior izquierda.

Bajamos por el desplegable hasta el final y pulsamos la opción Desarrolladores.

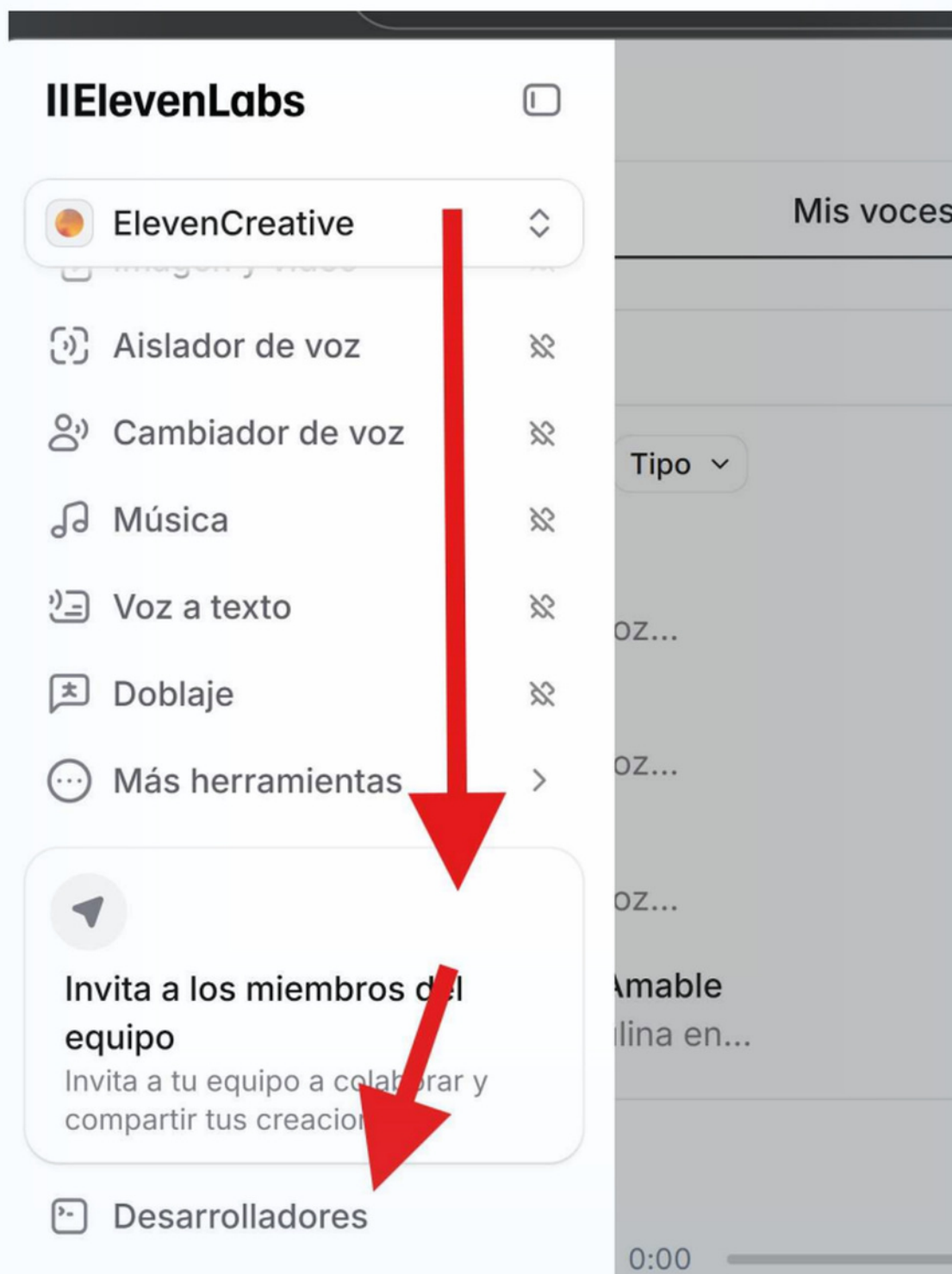

Al hacerlo, se abre una pantalla donde seleccionaremos la pestaña «Claves API» y pulsaremos «Generar clave».




En la siguiente pantalla le daremos un nombre, la configuraremos siguiendo estas instrucciones: La tecla de Restringir debe estar configurada como Apagado (no recomendado), o como Encendido, con los siguientes ajustes: Texto a voz: Acceso. Voces: Lee. Modelos: Acceso. Usuario: Lee.


Finalmente la generaremos.



Nuestra clave API aparecerá en pantalla. Tendremos que pulsar «Copiar» para poder añadirla a Grid 3.

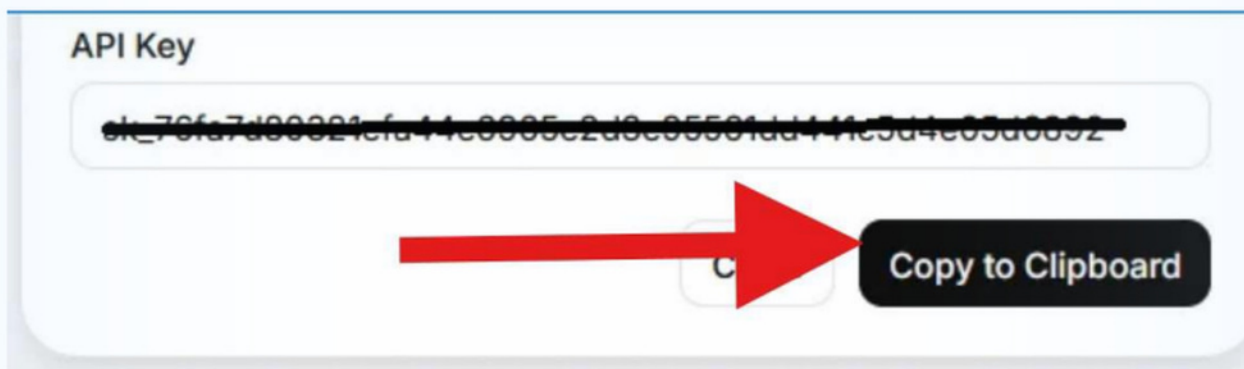


De nuevo en Grid 3, seleccionamos la barra de menú (tres líneas, esquina superior izquierda) → Configuración → Voz → Seleccionamos «Voz que lee».

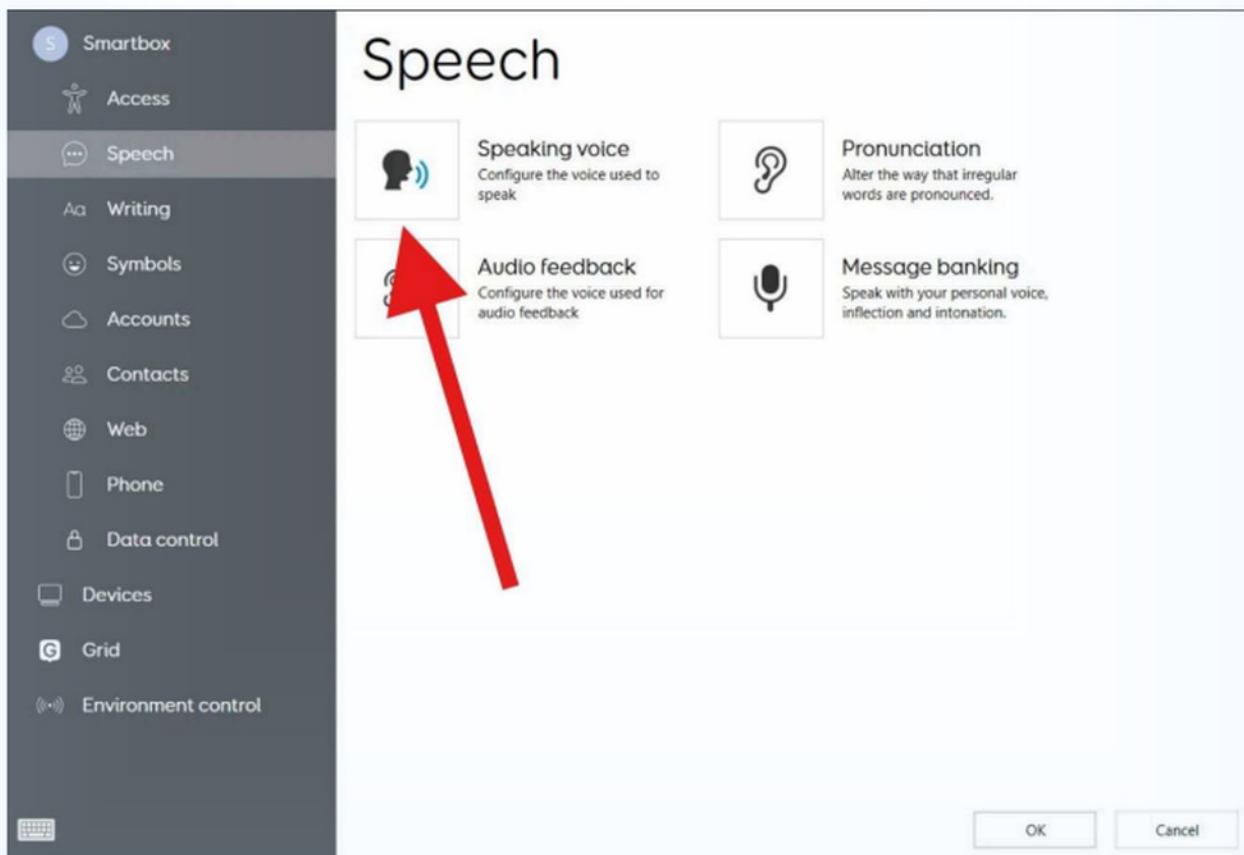




En el apartado de ElevenLabs, seleccionaremos «Configurar». Esto nos llevará a la pantalla para pegar nuestra API y pulsar «Conectar». Cuando se conecte con ElevenLabs, veremos un listado de voces entre las que estará la nuestra, que seleccionaremos.

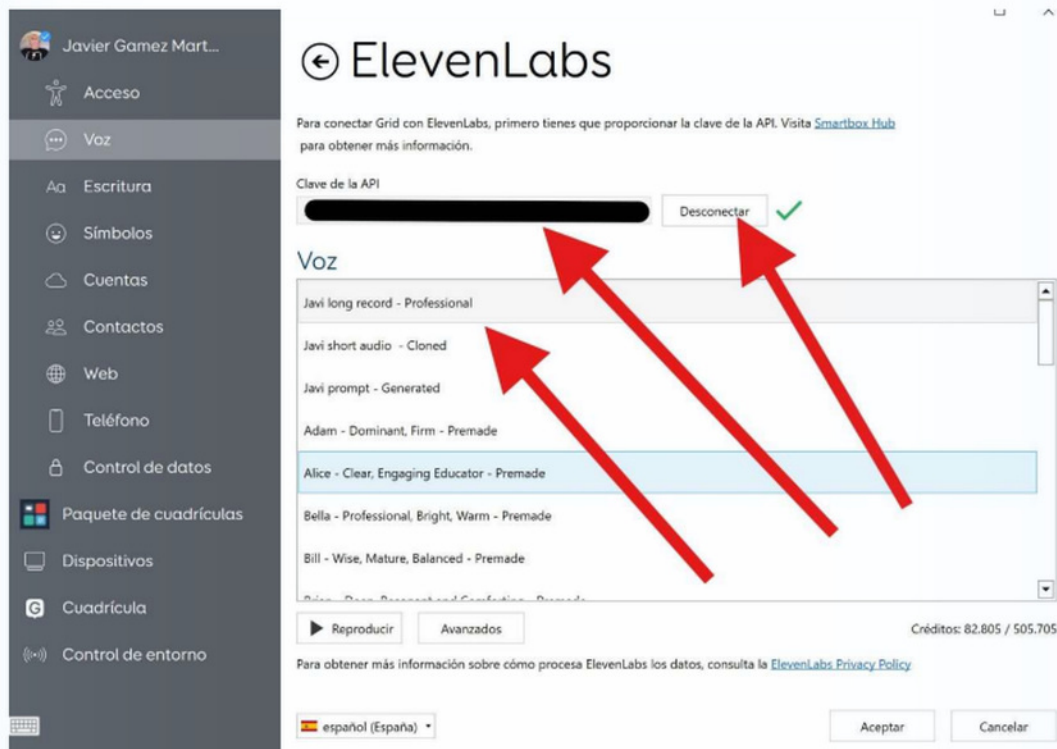

Podremos modularla desde Avanzado.



Tras pulsar «Aceptar», activaremos la pestaña «Usar voz online»; volveremos a pulsar partir de ese momento, siempre que tengamos conexión a Internet, Grid 3 usará nuestra voz de ElevenLabs.

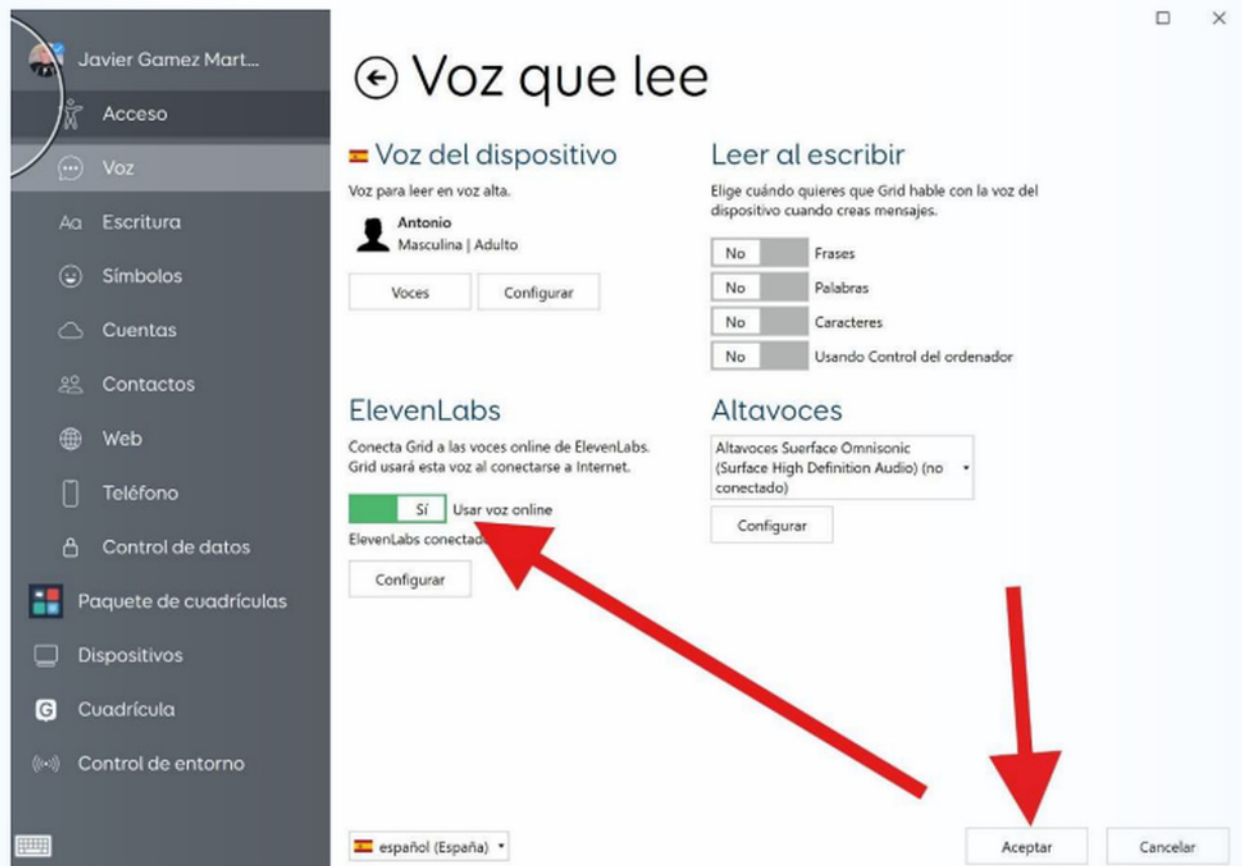

### Cosas a tener en cuenta:

- ElevenLabs nos da unos 500.000 créditos al mes, lo que para nuestro uso resulta más que suficiente.
- Las voces suenan mejor con frases y contextos que con palabras sueltas.
- A mayor valor de similitud, más se pueden notar las imperfecciones.
- Lo mismo sucede con la exageración del estilo.
- En textos de varios párrafos va perdiendo intensidad conforme avanza hasta hacerse casi inaudible. Mejor fragmentar el texto en varios.